管理番号

O60799

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月19日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	冷凍粉砕機	電源電圧	1相　100V	使用可能粉砕ロッド	75/120/12mL4連
型式	JFC-5000	周波数	50/60 Hz	使用可能容器サイズ	75/120/12mL
メーカー名	日本分析工業	粉砕方式	垂直往復動方式	AUTO設定数	6個(A～F)
機械Ser,No	JFC5-002	往復動回数	7段階	外寸	W410D580H555
製造年月	2021年　3月		500～1400回/分	重量	約71Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


動作確認条件：液体窒素/タングステン鋼球/試料　不使用

ドア：撮影の為、インターロック解除

・外観　…異常なし





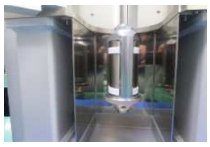

・通電確認

電源スイッチON/OFF　確認

モニター表示　確認

ドアインターロック　確認







・手動運転(MANUAL)

SPEED(Hz)設定：20Hz/50Hz　2種類で可動確認実施



SPEED(20Hz)
約500回/分



SPEED(50Hz)
約1400回/分

・自動運転(AUTO)

設定：SPEED/50Hz　時間：0.5min







設定時間終了でブザー鳴り、COMPLETE表示　確認

試料等は使用してませんが動作は問題無いと判断致します

動画有り

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK)　　作業工数[　3h　]

検査担当者[　Tokunaga　]

ユーザー名【　　】

（備考欄コメント）

試料容器サイズ：φ45mmxH125mm

出荷日　　年　　月　　日

[責任者]

穂苅