

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	水分測定装置 (カールフィッシャー)	Water Vaporizer	VA200	測定範囲	10 μ g~100mg H ₂ O
型式	CA-200 Moisturmeter	Stirrer	CA-200		
メーカー名	三菱化学アナリティック	電源	100VAC 50/60Hz	加熱温度範囲	70~300℃任意
機械Ser.No	E1M10630	電解電流	430mA	試料量	10g以下
製造年月	—	滴定速度	平均2.2mgH ₂ O/min	キャリアガス	窒素ガス0.1~0.5リットル/分

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観⇒若干の汚れはあるが問題なし。
2. 電源投入⇒問題なし。
3. 電解セル内回転子の確認⇒問題なし。
4. ボート動作(Loder, direction)⇒問題なし。
5. プリンター印字確認⇒問題なし。
6. 測定動作⇒問題なし。(試薬の代用→純水、N₂の代用→DA)
7. ボート空焼き確認⇒問題なし。



外観



電源ON



既存Parameter使用



回転子動作



ボート(Loder)



ボート(direction)



印字



Start→無水化準備



無水化中




測定可能



バージ中



空焼き中

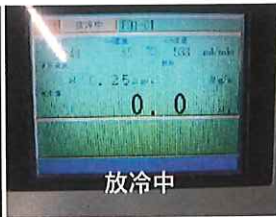

放冷中

取扱説明書:有

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK

作業工数 [4.5 hr]

検査担当者[雨宮]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

